




Fibrilación atrial? *¡Detéctela!*

El software holter custo diagnostic es una forma rápida y fiable de conseguir un diagnóstico inequívoco de la FA. En combinación con la grabadora inalámbrica de larga duración custo guard holter, dispondrá del sistema perfecto.



 **custo·med**
EXCELLENCE IN DIAGNOSTICS

custo FA diagnostic: Reconocer la fibrilación auricular de un vistazo!

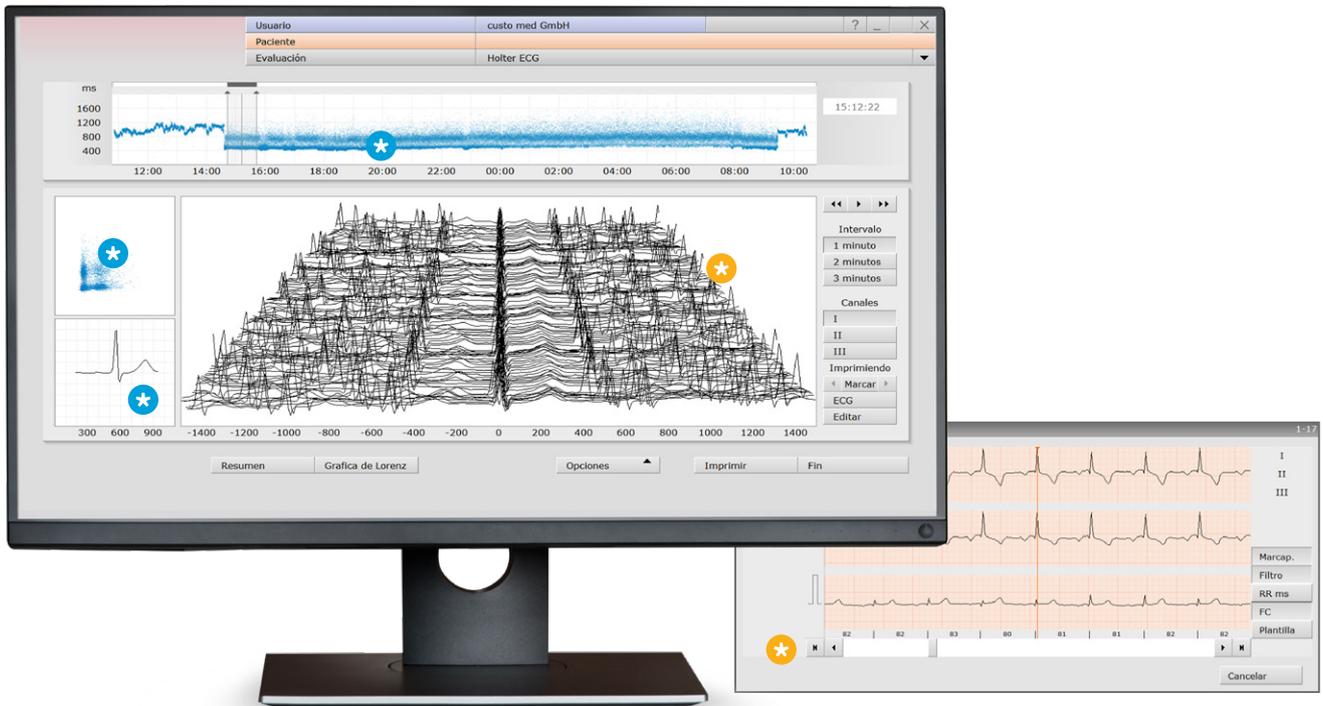

Identificación

- ★ La **tendencia RR** muestra claramente zonas de alta frecuencia que pueden desviarse del ritmo sinusal.
- ★ El **diagrama de Lorenz** muestra si hay arritmia o fibrilación auricular.
- ★ En el **complejo de suma** se puede reconocer si una onda P está presente o no.

Verificación

- ★ El inicio y el final de un episodio de fibrilación pueden reconocerse rápida y fácilmente en **la representación de ECG**.
- ★ El **ECG original** permite una evaluación inequívoca. **Los hallazgos confusos e inciertos en relación con la fibrilación auricular son ya cosa del pasado.**

custo holter MAPA COMBI: Grabación sincrónica de Holter ECG y MAPA



La combinación de custo screen y custo guard holter es la solución perfecta para el registro simultáneo de holter y presión arterial de larga duración. El sistema ofrece una gran comodidad de uso sin cables molestos y propensos a artefactos. Gracias a la medición de la presión arterial central y al análisis de la onda del pulso, también se puede obtener un buen resultado en la medición de la presión arterial durante los episodios de fibrilación auricular.




custo guard holter con custo wing

Holter ECG moderno con innovadores electrodos de parche

custo guard holter es la grabadora de holter perfecta que combina las ventajas de la experiencia y el desarrollo continuo.

Sus ventajas:

- *3 canales con dos derivaciones independientes*
- *Completamente inalámbrico y perfecto para un uso higiénico*
- *Comunicación del dispositivo y transmisión de datos rápidas y estables*
- *Detección de posición y movimiento para información contextual*
- *Óptima calidad de registro con el innovador electrodo custo wing*
- *Cortos tiempos de carga de la batería*
- *Reconocimiento de marcapasos*
- *Control del sistema mediante monitorización en el PC*
- *Bluetooth Low Energy para aplicaciones móviles*
- *Indicador LED de estado de carga y detección de alta frecuencia*
- *Grado de protección IP65: ideal para desinfección*
- *Gran capacidad de grabación (varios meses)*
- *Autonomía de hasta 7 días con una sola carga de batería*
- *Muy pequeña y ligera con sólo 30 g*
- *Base custo docking station con una o seis ranuras para la comunicación del dispositivo y carga*
- *Posibilidad de varias aplicaciones de electrodos*
- *Interfaz inteligente (guard holter viewer) en custo diagnostic*
- *Posibilidad de varias configuraciones y modos de registro*

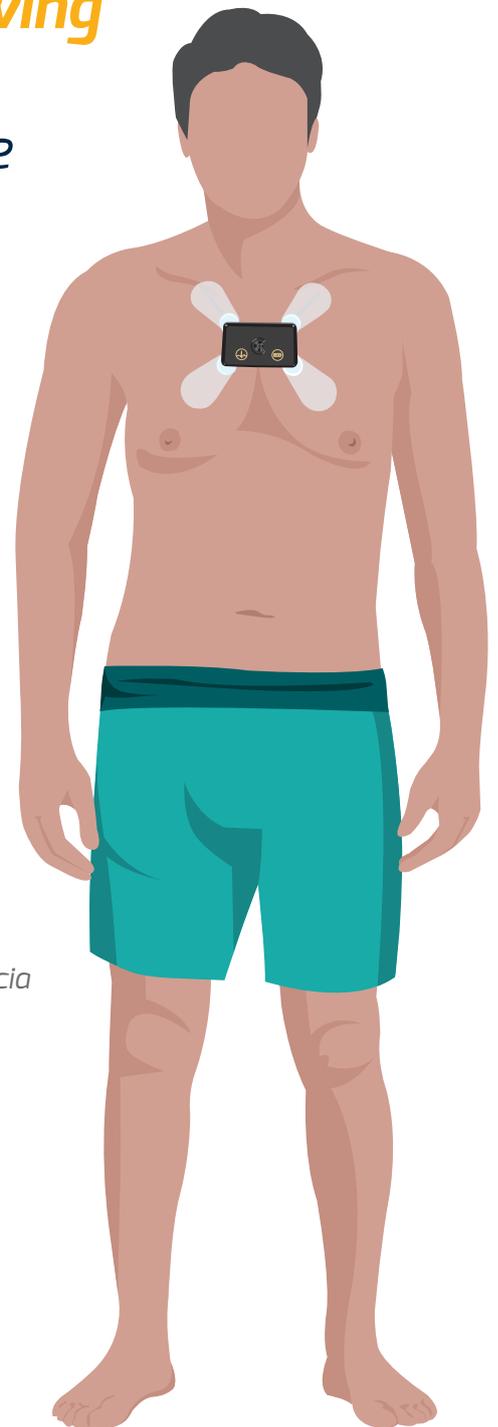

Soluciones de sistemas diagnóstico cardiopulmonar innovadoras desde hace más de 40 años.


Desde 1982, nuestra marca es sinónimo de soluciones de sistemas innovadores para el diagnóstico cardiopulmonar. En colaboración con socios de distribución y servicio competentes, ofrecemos soluciones profesionales y tenemos en cuenta sus circunstancias individuales y estructuras informáticas. Ya sean estacionarios o Estaciones de trabajo individuales o soluciones de red multisitio, consultas o clínicas. Su sistema modular custo med es una inversión de futuro.

Nuestra plataforma modular de diagnóstico custo es el vínculo inteligente entre la tecnología médica y el software de gestión.

www.customed.de



Visítenos en YouTube!

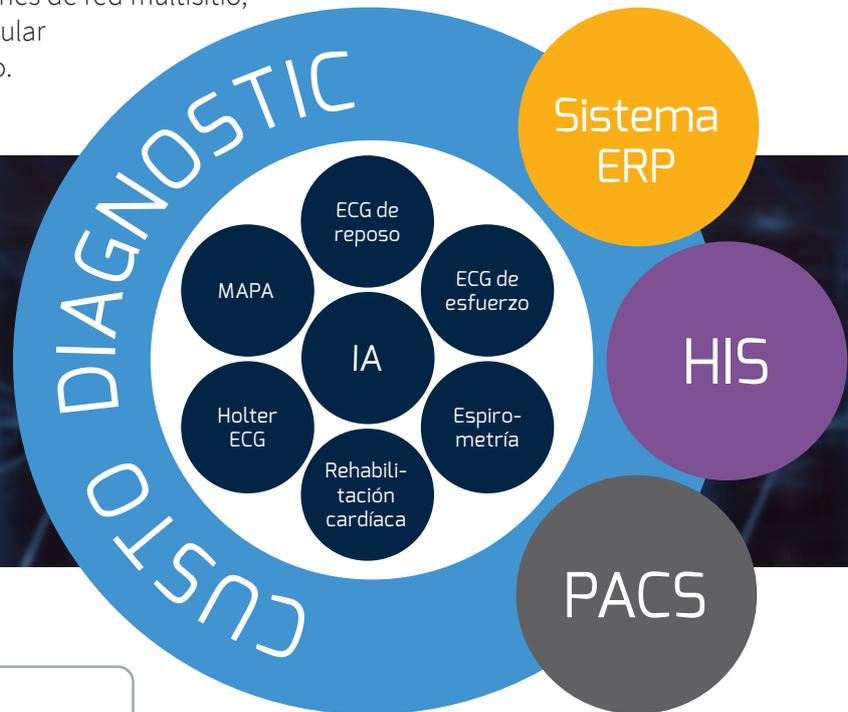

custo med – your local dealer

Contacto:

custo med LATAM SAS
Bogotá – Colombia
latam@customed.de
www.customedlatam.com

